



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(12%, 15孔)

产品编号	产品名称	包装
D0178S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(12%, 15孔)	10块

### 产品简介:

- 碧云天的BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(BeyoGel™ TBE Precast PAGE Gel)是一种使用安全、便捷、高品质的常规尺寸聚丙烯酰胺非变性预制凝胶, 主要用于10-3000bp双链核酸或10-3000nt单链核酸的高分辨率电泳分析或纯化, 广泛用于限制性酶切产物、PCR产物、Southern和引物分析等的实验。本预制胶有1.5厘米高的浓缩胶, 具有非常优良的分离效果, 电泳后DNA条带平整、清晰、细腻、锐利, 几乎没有边缘效应; 本预制胶胶板为玻璃材质, 电泳效果非常好, 达到甚至超过了自配TBE PAGE胶的电泳效果。
- 碧云天的BeyoGel™ TBE PAGE预制胶提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶, 并有10孔和15孔两种孔数选择。固定浓度胶包括5%、10%、12%和15%; 梯度胶浓度为4-20%。如果有较大量的特殊浓度需求, 碧云天可提供定制服务。每种预制胶的最佳分离范围请参考下表:

产品编号	预制胶浓度	孔数	最大上样量	电泳缓冲液	最佳分离范围	溴酚蓝前沿位置
D0171/D0172	5%	10/15	60/30μl	1X TBE	~200bp-2kb	~70±5 bp
D0174/D0175	10%	10/15	60/30μl	1X TBE	~50bp-1.5kb	~35±5 bp
D0177/D0178	12%	10/15	60/30μl	1X TBE	~30bp-1.2kb	~30±5 bp
D0182/D0183	15%	10/15	60/30μl	1X TBE	~20bp-1kb	~20±5 bp
D0185/D0186	4-20%	10/15	60/30μl	1X TBE	~10bp-3kb	~15±5 bp

- 本预制胶含有1.5厘米高的4%浓缩胶, 可以有效确保获得非常锐利的条带。
- 本预制胶丙烯酰胺(Acrylamide)与甲叉丙烯酰胺(Bisacrylamide)的比例为29:1, 凝胶厚度为1.5mm。加样孔数为10孔的最大上样量为60μl, 加样孔数为15孔的最大上样量为30μl。胶板尺寸: 宽×高×厚度为98×84×4.1mm; 凝胶尺寸: 宽×高×厚度为81×74×1.5mm。
- 聚丙烯酰胺凝胶电泳(Polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE)技术广泛用于蛋白质、核酸及蛋白质-核酸复合物的分离纯化、检测、鉴定、分子量分析等实验, 是生命科学中最基本的实验技术之一。常见的Western印迹(Western blot)检测就是基于PAGE的。
- 核酸电泳通常是基于长度来电泳分离DNA或RNA片段的分析技术。将待分析的核酸样品置于凝胶中, 核酸由于其糖磷酸主链带负电在电场的作用下向阳极迁移。不同大小的片段能够通过迁移速度差异来完成分离, 较长的分子迁移速度较慢, 因为它们在凝胶中的阻力较大。由于分子的大小影响其迁移速度, 在一定的时间内, 较短的片段比较长的片段更接近阳极[1]。在核酸电泳实验中, 常用的有两种凝胶: 琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶。与琼脂糖凝胶相比, 聚丙烯酰胺凝胶具有更高分辨率和灵敏度、低本底染色、所需样品量较少、高效印迹、易于从凝胶中提取DNA、不干扰酶反应以及准确性和可重复性高等优点[2]。常用于核酸电泳的PAGE凝胶有TBE PAGE凝胶、TBE-Urea PAGE凝胶[3]和EMSA PAGE凝胶等。其中, TBE PAGE凝胶由TBE缓冲液(Tris-硼酸-EDTA)制备, 主要用于核酸的非变性电泳, 常应用于DNA或RNA片段的高分辨率分析, 包括限制性酶切产物、PCR产物、Southern和引物等的分析等实验。
- 碧云天的BeyoGel™ TBE PAGE预制胶由高纯度的Tris、硼酸、EDTA等试剂制备, 缓冲能力强, 适合长时间电泳, 且分辨率高、分离效果佳。严格的质量控制可确保凝胶和缓冲液中无DNase和RNase。
- 本预制胶使用常用的TBE电泳液, 推荐使用碧云天TBE (1X premixed powder) (ST720/ST721)、TBE (5X premixed powder) (ST723)以及TBE (5X) (ST718), 或参考使用说明自行配制相应的电泳液。
- **关于10孔和15孔预制胶的选择:** 需要检测的样品数量多或者需要定量时, 推荐使用15孔预制胶, 通量更大、更便于进行多样品的定量统计分析; 需要获得非常漂亮的代表性图片时, 推荐使用10孔预制胶, 10孔预制胶获得的条带更加平整和锐利。
- **本产品使用安全、便捷。** 本预制胶无需配制, 即开即用, 去掉梳子即可上样, 而传统的TBE PAGE配制凝胶繁琐费时, 并且制胶时还会接触有毒和刺激性试剂。
- **本产品质量稳定。** 本预制胶采用高品质玻璃胶板, 和塑料胶板相比, 大大减少了胶板对核酸的吸附, 电泳效果更好。本产品流水线灌注, 品质稳定可靠, 重复性好, 不同批次的产品一致性高。
- **本产品电泳效果好。** 本预制胶的核酸分离效果极佳, 核酸条带平整、清晰、细腻、锐利。
- **本产品电泳槽兼容性好。** 本预制胶兼容市场上主流的小型电泳槽, 如碧云天的MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(E6001/E6005)、Bio-Rad公司的Mini-PROTEAN® Tetra Cell电泳槽、Life公司的XCell SureLock® Mini-Cell电泳槽(需与碧云天可免费提供的特制挡板配合使用)、以及上海天能、北京六一等的mini胶电泳槽或其它胶板宽度在10厘米的电泳槽。

- **本产品电泳时间短。**本预制胶推荐的电泳电压和电泳时间为150V 50-75分钟，即可完成电泳并获得非常平整和锐利的电泳条带。具体的电泳时间取决于凝胶浓度。
- **本产品取出凝胶极为便捷。**只需用刀片在玻璃胶板一侧轻轻划一下即可，并且玻璃胶板打开极为方便，无需特殊的撬工具。
- 本预制胶属于特殊用途预制胶。碧云天的特殊用途预制胶的比较和选择可以参考碧云天的相关网页：  
<https://www.beyotime.com/support/special-precaster-gel.htm>。

#### 包装清单：

产品编号	产品名称	包装
D0178S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(12%, 15孔)	10块
—	说明书	1份

#### 保存条件：

4℃保存，1-2个月有效。切勿置于0℃以下冷冻。

#### 注意事项：

- 由于本预制胶保质期较短，需新鲜制备，在您确认订购后约3-5个工作日才能发货。
- 本预制胶不能置于0℃以下冷冻，否则凝胶会冻裂。
- 电泳液建议新鲜配制，试剂纯度不够、反复使用或长期放置的缓冲液会降低电泳效果。电泳缓冲液多次使用后，离子强度降低，pH值上升，缓冲性能下降，可能使电泳产生条带模糊和不规则的DNA带迁移的现象。
- 本预制胶为了兼容几乎所有厂家的小型凝胶电泳槽，所以改进了与电泳槽U型硅橡胶密封条的吻合结构(如碧云天、Bio-Rad等公司的电泳槽)。建议在电泳时须将具有突起结构的U型硅橡胶密封条取出后反过来安装，使其没有突起的平滑面朝外，从而防止漏液，见下图。一般内槽电泳液加满，外槽电泳液没过电泳槽底部的阳极即可，并且电泳结束后的电泳缓冲液可以作为外槽缓冲液重复使用1-2次。另外，部分公司都已经配套无突起结构的U型硅橡胶密封条，使用这样的U型硅橡胶密封条就不会出现内外槽之间的漏液现象。

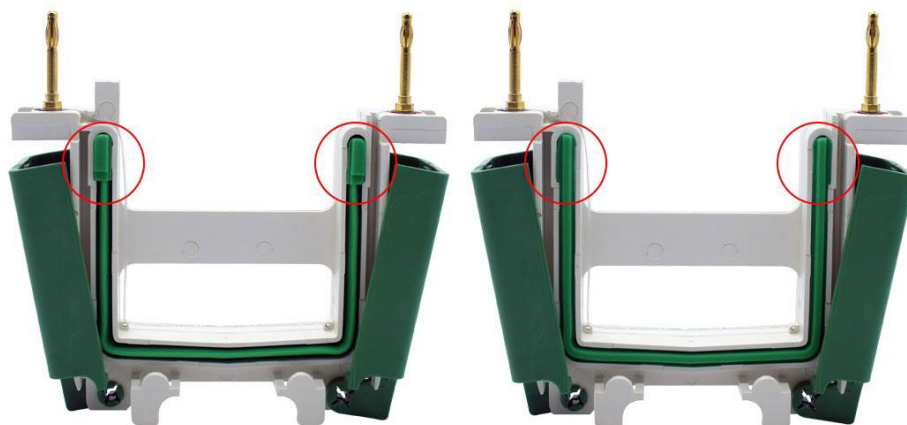


图1. 碧云天、Bio-Rad等公司的电泳槽U型硅橡胶密封条的突起结构图。由于碧云天的BeyoGel™ PAGE预制胶的该部位是平的，使其兼容几乎所有厂家的小型胶电泳槽，所以电泳时须将具有突起结构的硅橡胶密封条(左图)取出后反过来安装(右图)，使其没有突起的平滑面朝外，从而防止漏液。

- 由于碧云天的BeyoGel™ PAGE预制胶比Life公司的XCell SureLock® Mini-Cell电泳槽配套的NuPAGE® Gel或Novex® Mini Gel略薄，所以需加特制挡板配合使用。如有需要，请在订购本产品时告知，碧云天会免费赠送该特制挡板。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 使用说明：

- 样品准备：**限制性酶切产物、PCR产物、引物等加入适量DNA上样缓冲液，推荐使用碧云天的DNA上样缓冲液(6X) (D0071)。  
**注：**BeyoGel™ TBE PAGE预制胶分辨率非常高，DNA上样量需求显著低于琼脂糖凝胶，一般为琼脂糖凝胶的10%左右，建议每孔0.2μg左右的DNA量即可。但如果后续实验目的是为了切胶回收目的DNA，可以根据需要加大上样量。
- 预制胶、电泳液的准备：**
  - 将BeyoGel™ TBE PAGE预制胶从包装袋中取出。
  - 将预制胶固定在电泳槽中，平稳、缓慢地拔出梳子。
  - 配制1X TBE电泳缓冲液。推荐使用碧云天TBE (1X premixed powder) (ST720/ST721)、TBE (5X premixed powder) (ST723) 以及TBE (5X) (ST718)。1X TBE中含有89mM Tris-Borate、2mM EDTA，pH8.3。
  - 内槽加满电泳液，外槽加入电泳液没过电泳槽底部的阳极即可。电泳槽推荐使用碧云天的MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(E6001/E6005)。  
**注：**由于预制胶孔中有残留的储存缓冲液，所以建议用1毫升移液枪吸取电泳液轻轻吹打加样孔，将加样孔冲洗干净，

去除气泡和残留的储存缓冲液，这样电泳的效果更佳。

3. 上样：将10微升吸头或BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(FTIP205/FTIP206)的尖端垂直方向轻轻插入到上样孔中即可上样，吸头避免戳破凝胶，更不能使胶板变形导致样品泄漏。推荐使用碧云天的DNA Ladder (0.1-10kb, 21 bands) (D0107/D0109)。  
**注：**最佳上样量须通过实验来确定，样品过量较易导致条带拖尾和信号过强。
4. 将电泳槽盖子盖好，并将电源线插头插入电泳仪电源插孔(红对红，黑对黑)。一般在150V电压，电泳50-75分钟左右即可，电泳至蓝色染料溴酚蓝至胶的下缘1/4处或其它合适位置，停止电泳。实际电泳时间与电泳液质量、凝胶的浓度和数量等因素有关系，需自行适当调整。电泳电源推荐使用碧云天的BeyoPower™中电流电源(300V/600mA/100W) (E6080)或BeyoPower™高电流电源(300V/2000mA/200W) (E6085)。
5. 取出玻璃胶板，将刀片从玻璃胶板一侧轻轻划一下，稍加用力慢慢扳开或用刮板轻轻撬开玻璃胶板，用刮板将凝胶取出。
6. 染色：将凝胶放至洁净容器内(例如适当大小的玻璃培养皿)，加入适量的核酸染色液，确保至少盖住凝胶。在摇床上缓慢摇动(30-50rpm)染色10-30分钟。用超纯水或TBE洗涤1-3次，每次3-5分钟，即可使用凝胶成像设备观察电泳后的染色结果。洗涤次数越多，时间越长，背景染色会越浅，但洗涤次数过多或时间过长，也会导致核酸条带的染色变弱。核酸染料推荐使用碧云天的NA-Red (EB升级换代产品, 2000X) (D0128/D0130)。

#### 常见问题：

1. 电泳示踪染料溴酚蓝扭曲、电泳条带大幅扭曲、电泳时间大幅度延长：  
可能原因是内槽缓冲液泄漏而导致。建议重新夹一下胶板，防止在电泳过程中内槽液面逐步降低。
2. 使用自己配制的电泳缓冲液与上样缓冲液电泳后条带较模糊：  
缓冲液配制不当，或长期放置变质，都会对本预制胶的电泳效果产生影响。推荐使用碧云天TBE (1X premixed powder) (ST720/ST721)、TBE (5X premixed powder) (ST723)以及TBE (5X) (ST718)。
3. 在上样时不可将吸头过度插入上样孔中，吸头的过度插入会使胶板变形，导致样品泄漏。

#### 参考文献：

1. Green MR, Sambrook J. Cold Spring Harb Protoc. 2021. 2021(1).
2. Tietz D, Aldroubi A, Pulyaeva H, Guszczynski T, Garner MM, et al. Electrophoresis. 1992. 13(9-10):614-6.
3. Summer H, Gräner R, Dröge P. J Vis Exp. 2009. (32):1485.

#### 相关产品：

产品编号	产品名称	包装
D0171S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(5%, 10孔)	10块
D0172S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(5%, 15孔)	10块
D0174S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(10%, 10孔)	10块
D0175S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(10%, 15孔)	10块
D0177S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(12%, 10孔)	10块
D0178S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(12%, 15孔)	10块
D0182S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(15%, 10孔)	10块
D0183S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(15%, 15孔)	10块
D0185S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(4-20%, 10孔)	10块
D0186S	BeyoGel™ TBE PAGE预制胶(4-20%, 15孔)	10块
R0231S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(5%, 10孔)	10块
R0232S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(5%, 15孔)	10块
R0235S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(10%, 10孔)	10块
R0236S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(10%, 15孔)	10块
R0243S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(15%, 10孔)	10块
R0244S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(15%, 15孔)	10块
R0248S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(20%, 10孔)	10块
R0249S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE预制胶(20%, 15孔)	10块
D0071	DNA上样缓冲液(6X)	2ml
D0072	BeyoRed DNA上样缓冲液(6X)	2ml
D0107	DNA Ladder (0.1-10 kb, 21 bands)	100次
D0109	DNA Ladder (0.1-10 kb, 21 bands, with BeyoRed)	100次
D0110	DNA Ladder (0.2-12 kb, 12 bands)	100次
D0111	DNA Ladder (0.2-12kb, 12 bands, with BeyoRed)	100次
D0128	NA-Red (EB升级换代产品, 2000X)	1ml
D0130	NA-Red (EB升级换代产品, 2000X)	5ml

D0139	Gel-Red (EB升级换代产品, 10000X)	0.2ml
D0140	Gel-Red (EB升级换代产品, 10000X)	1ml
ST718	TBE (5X)	500ml
ST720	TBE (1X premixed powder)	2L
ST721	TBE (1X premixed powder)	10×2L
ST723	TBE (5X premixed powder)	2×2L
ST760-100g	Tris (Electrophoresis Grade)	100g
ST760-500g	Tris (Electrophoresis Grade)	500g
ST760-2.5kg	Tris (Electrophoresis Grade)	2.5kg
ST761-100g	Tris (Molecular Biology Grade)	100g
ST761-500g	Tris (Molecular Biology Grade)	500g
ST761-2.5kg	Tris (Molecular Biology Grade)	2.5kg
E6001	MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(4胶)	1套
E6005	MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(2胶)	1套
E6080	BeyoPower™中电流电源(300V/600mA/100W)	1套
E6085	BeyoPower™高电流电源(300V/2000mA/200W)	1套
FTIP205-10bags	BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(1-200μl, 袋装)	1000个/袋,10袋/箱
FTIP205-1bag	BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(1-200μl, 袋装)	1000支/袋
FTIP206-12bxs	BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(1-200μl, 盒装)	96支/盒, 12盒/箱
FTIP206-1box	BeyoGold™凝胶电泳上样吸头(1-200μl, 盒装)	96支/盒, 1盒

Version 2022.08.17