



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## PCDHAC1 Knockout HEK293T RIPA Lysate

| 产品编号   | 产品名称                                 | 包装    |
|--------|--------------------------------------|-------|
| L13388 | PCDHAC1 Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg |

### 产品简介:

- PCDHAC1 Knockout HEK293T RIPA Lysate (PCDHAC1基因敲除HEK293T细胞RIPA裂解液)是通过同时表达Cas9、目的基因sgRNA和puromycin抗性基因并实现了目的基因CRISPR敲除的多克隆HEK293T细胞的RIPA裂解液。该细胞中目的基因的敲除已经通过T7EI法的验证。本产品可用于该目的基因敲除后其信号通路相关蛋白的研究，也可以用于该基因相应抗体的验证。
- 本RIPA裂解液源于可同时表达Cas9、目的基因sgRNA和puromycin抗性基因的慢病毒感染HEK293T细胞并经过puromycin筛选后获得的多克隆细胞。制备该细胞的相应慢病毒的基因序列的关键图谱信息请参考图1。

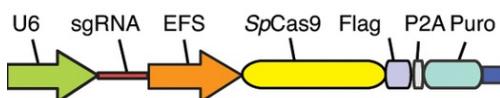


图1. 可同时表达sgRNA、Cas9和puromycin抗性的慢病毒其基因序列的关键图谱信息。

- 该细胞中目的基因的敲除已经通过T7EI法的验证。
- 由于本细胞是通过CRISPR/Cas9技术获得的多克隆细胞，基于CRISPR/Cas9技术的特点，理论上平均有2/3的细胞发生移码突变而导致了目的基因的敲除，平均有1/3的细胞并未发生移码突变。很多情况下有约2/3的细胞发生目的基因的敲除，已经足以进行很多的目的基因的生物学功能的研究了。如果希望获得100%基因敲除的细胞，可以自行使用本产品筛选单克隆细胞，或者委托碧云天进行单克隆细胞株的筛选服务。
- 本RIPA裂解液用于实验时，建议同时选购无任何靶向的对照细胞RIPA裂解液Control Knockout HEK293T RIPA Lysate (L00025)或靶向GFP的对照RIPA裂解液GFP Knockout HEK293T RIPA Lysate (L00027)。
- 碧云天同时提供基于CRISPR/Cas9技术的PCDHAC1基因敲除的质粒(L13385 pLenti-PCDHAC1-sgRNA)、慢病毒(L13386 PCDHAC1 Knockout Lentivirus)、HEK293T细胞(L13387 PCDHAC1 Knockout HEK293T Cells)、HEK293T敲除细胞的RIPA裂解液(L13388 PCDHAC1 Knockout HEK293T RIPA Lysate)、HEK293T敲除细胞的Trizol裂解液(L13389 PCDHAC1 Knockout HEK293T Trizol Lysate)等产品，具体请在碧云天网站查询或在本产品网页点击相应产品。
- 用于制备本产品的RIPA裂解液为碧云天生产的P0013B RIPA裂解液(强)，其具体组分请查阅产品网页或说明书。
- PCDHAC1基因的基本信息如下：

| Species | Gene Symbol | Gene ID | GenBank Accession | Transcript |
|---------|-------------|---------|-------------------|------------|
| Human   | PCDHAC1     | 56135   | BC136785          | NM_018898  |

| About the gene     |   |
|--------------------|---|
| Official Symbol    | PCDHAC1   |
| Previous Symbol    | -   |
| Official Full Name | protocadherin alpha subfamily C, 1  |
| Synonyms           | PCDH-ALPHA-C1   |
| Location           | 5q31.3  |
| Gene Type          | protein_coding  |
| Uniprot ID         | Q9H158  |
| Pathway/Library    | Lung Cancer Growth Related Genes Library  |
| Gene Summary       | This gene is a member of the protocadherin alpha gene cluster, one of three related gene clusters tandemly linked on chromosome five that demonstrate an unusual genomic organization similar to that of B-cell and T-cell receptor gene clusters. The alpha gene cluster is composed of 15 cadherin superfamily genes related to the mouse CNR genes and consists of 13 highly similar and 2 more distantly related coding sequences. The tandem array of 15 N-terminal exons, or variable exons, are followed by downstream C-terminal exons, or constant exons, which are shared by all genes in the cluster. The large, uninterrupted N-terminal exons each encode six cadherin ectodomains while the C-terminal exons encode the cytoplasmic domain. |

|  |   |
|--|---|
|  | These neural cadherin-like cell adhesion proteins are integral plasma membrane proteins that most likely play a critical role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain. Alternative splicing has been observed and additional variants have been suggested but their full-length nature has yet to be determined. |
|--|---|

## 包装清单：

| 产品编号   | 产品名称                                 | 包装    |
|--------|--------------------------------------|-------|
| L13388 | PCDHAC1 Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg |
| —      | 说明书                                  | 1份    |

## 保存条件：

-20°C保存，3个月有效；-80°C保存，至少一年有效。

## 注意事项：

- 碧云天拥有sgRNA序列的知识产权，如果需要sgRNA序列，请在订购后发送邮件向info@beyotime.com索取。sgRNA序列信息与本产品，未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。使用者在发表研究论文或结果时，应注明来源。
- 对于非目录产品的CRISPR基因敲除细胞RIPA裂解液的定制，可联系碧云天技术服务service@beyotime.com。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 使用说明：

### 1. 细胞RIPA裂解液样品的蛋白浓度测定：

推荐使用碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0009/P0010/P0010S/P0011/P0012/P0012S)测定蛋白浓度。由于本产品含有较高浓度的去垢剂，不建议使用Bradford法测定本产品的蛋白浓度。RIPA裂解液的使用说明请参考：<https://www.beyotime.com/product/P0013B.htm>。

### 2. 细胞RIPA裂解液的使用：

本RIPA裂解液测定浓度后加入SDS-PAGE蛋白上样缓冲液即可用于SDS-PAGE、Western检测、以及目的基因抗体的验证等。

## 相关产品：

| 产品编号     | 产品名称                                 | 包装        |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| L00025   | Control Knockout HEK293T RIPA Lysate | 100μg     |
| L00027   | GFP Knockout HEK293T RIPA Lysate     | 100μg     |
| P0009    | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)                    | 5000次     |
| P0010    | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)                    | 500次      |
| P0010S   | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)                    | 200次      |
| P0011    | BCA蛋白浓度测定试剂盒                         | 5000次     |
| P0012    | BCA蛋白浓度测定试剂盒                         | 500次      |
| P0012S   | BCA蛋白浓度测定试剂盒                         | 200次      |
| P0012A   | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒                      | 可制30-50块胶 |
| P0012AC  | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒                    | 可制30-50块胶 |
| P0013B   | RIPA裂解液(强)                           | 100ml     |
| P0014A/B | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder)        | 1/10L     |
| P0014C/D | SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X)           | 100/500ml |
| P0015    | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)                  | 2ml       |
| P0015L   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)                  | 15ml      |
| P0015B   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)                  | 5ml       |
| P0015F   | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)                  | 2ml       |

Version 2020.12.08